

Facilis[®]

Stoel voor transfert patiënt, multifunctioneel



Het transfereren van de patiënt uit het bed, verplaatsen, nuttigen van een maaltijd aan tafel, ...

Deze nieuwe assistent vergemakkelijkt de transfer uit het bed en omgekeerd en geeft een ideale zitpositie op de zitting voor de noodzakelijke dagelijkse verplaatsingen van een afhankelijk persoon.

Dit toestel is ideaal te gebruiken in een thuisituatie, zieken of verzorgingstehuis door een professioneel of particulier van alle leeftijden (zelfs senioren).



Innovation 2014
BREVET DEPOSE

Een uniek concept . Ingenieuze details.

Facilis is ontworpen voor en door de medische professional en heeft de handeling van opstaan en liggen heruitgevonden. Facilis maakt het mogelijk om meerdere transferts te maken die het fysieke als het psychische comfort van de patient aanzienlijk verhoogd maar ook deze van de zorgverstreker.

Het principe van Facilis bestaat erin om op een zeer eenvoudige manier de patient uit het bed te helpen. De stoel kan zich door zijn assymetrische vorm platleggen op het bed door middel van de neerlegfunctie van de rugleuning. Op die manier kan de zorgverstreker de patient zijdelings een kwartdraai rollen op het gecreeerde platform.

Van zodra de rugleuning elektronisch wordt rechtgezet kan de patient comfortabel zitten, naar de douche getransfereerd worden, een maaltijd nuttigen, zijn familie ontvangen, gebruik maken van de toiletstoelfunctie (optioneel).

Technische kenmerken:

- Hoogte van de rugleuning: 42,5 cm
- Breedte van de zitting: 45 cm
- Hoogte zitting/bodem: 50-65 cm
- Totale breedte: 59 cm
- Hoogte armsteunen-zittend: 22 cm
- Totale hoogte: 143 cm – 158 cm
- Diameter van de wielen: 7.5cm of 10 cm
- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
- Netto gewicht: 60 kg
- Afstandsbediening 4 toetsen
- Remmen: via voet
- Behandeling oppervlak: epoxyverf
- Materiaal zitting, armsteunen en rugleuning: Vinyl medische klasse, onbrandbaar
- Garantie: 2 jaar
(zie specifieke voorwaarden)



EXCLUSIEVE VERDELER BENELUX

www.mobimed.be | info@mobimed.be

Tel. +32 478 96 38 21

Hoofdkantoor & Showroom

Fax +32 51 24 05 21

Bruggesteenvweg 133/3, 8830 Gits (Roeselare)

Showroom enkel open op afspraak!




MOBIMED[®]

MOBIMED medical products
specialist in uw zitcomfort



GE II

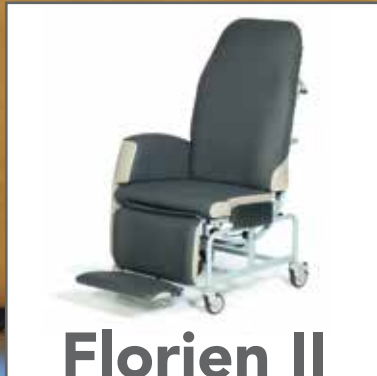

Florien II



Omega

1. GE II

De GE II is een totaal nieuwe dynamische zetel ontworpen op basis van bio-mechanische research en ergonomische design principes. De GE II is een dynamische tilt-zetel met een superieure posterieure ondersteuning, een uitzonderlijke positionering en een uitmuntend comfort en drukmanagement.



Algemeen gebruik

- Specialisatie en algemene ziekenhuizen,
- Thuiszorg,
- Huisgebruik,
- Voor degenen met risico op decubitis,
- Voor mensen die langdurig moeten zitten,
- Voor mensen die ondersteuning en hulp bij het positioneren,
- Voor semi en non ambulante gebruikers.

- Algemene rehabilitatie
- Dementie
- Alzheimer
- MS
- Parkinson
- ALS
- Beroerte
- Hersenverlamming



Kenmerken en voordelen

- Tilt-in-Space en beensteunverhoging gecontroleerd door Regulated Motion technology,
- Elektrisch aangedreven, of Manuele gasdrukveer,
- Ondersteunende rugleuning,
- Unieke laterale steunen,
- Zitcomfort in zitting en rugzijde bevordelijk voor de drukverdeling,
- Voetsteun met voetplaatpositionering,
- Aanpasbare voetplaat in hoogte en hoek,
- Occupant zitvlaklengte kan op maat worden gemaakt,
- Ademende Dartex-stoffering op alle contactoppervlakken,
- Twee wielopties:
 - 100 mm wielen, geremd langs achter,
 - 315 mm wielen met rembaar.

2. Florien II



Een dynamisch en zeer mobiel zitsysteem, de Florien II zorgt voor meer onafhankelijkheid door een correcte positionering en vergemakkelijkt een ondersteunende en comfortabele zitpositie. Unieke kenmerken zoals een ergonomisch voorgevormde rugleuning en modern styling maakt van deze zetel een zeer goede oplossing voor een breed publiek van gebruikers en omgevingen.



- Dementie
- Alzheimer
- MS
- Parkinson
- ALS
- Beroerte
- Hersenverlamming

Algemeen gebruik

- Rust en verzorgingstehuizen,
- Algemene verzorging van ouderen,
- Mogelijk tot thuisgebruik,
- Hospices Ziekenhuizen,
- Voor patiënten die zijdelijke transfers maken,
- Algemene verzorgingspatiënten voor semi en non-ambulante gebruikers.

Kenmerken en voordelen

- Tilt in Space positionering met slotfunctie,
- Beensteun verhogingsmogelijkheid,
- Armleuning verwijderbaar voor makkelijke zijdelinkse transfer,
- Drie zitlengte opties: 435mm, 460mm en 485 mm,
- Verstelbare integrale hoofdsteun,
- Voorgevormde ergonomische rugleuning,
- Ergonomische duwhendel,
- 25° negatieve beensteun positionering mogelijk,
- Twee wiel opties: 100mm wielen geremd op achterste wielen en grote wielen van 315mm met rembaar.



Duo

De Duo familie van multi-positionerings zitsystemen bevat de Duo Major, de Duo Minor en de Duo Mini. Hun dynamische kenmerken voorzien in een uitstekende positionering en orthostatisch management voor de mensen die riskeren om een onnatuurlijke lichaamshouding te ontwikkelen of het moeilijk hebben om een middenpositie te behouden en additionele support nodig hebben.

3. OMEGA



Een robuuste, duurzame zetel die krachtige bewegingen kan weerstaan en toch een veilige en relaxerende zithouding kan geven.

Een voorgevormde rugleuning en zijkanten in contouren geven een optimaal comfort en geeft een goede houding voor activiteiten zoals eten, relaxeren en slapen wat gestimuleerd wordt door een unieke combinatie van rug en zittingmanipulatie

Kenmerken en voordelen

- Gecombineerd veermechanisme tussen leuningverstelling en variabele zithoek,
- Horizontale en verticale voorgevormde rugzitting die zorgt voor goede stabiliteit,
- Twee rugzithoogtes mogelijk,
- Drie zitbreedtes: 380mm, 430mm en 510mm,
- Drie zitlengte opties: 430mm, 470 en 500mm, (te specificeren bij fabricatie)
- Supportive Reflexion™ foam beensteun,
- Ergonomisch geplaatste duwhendel,
- Vast metalen frame met modulaire rugleuning, arm- en zitcomponenten.

Algemeen gebruik

- Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen,
- Thuisgebruik,
- Voor mensen met de ziekte van Huntington of andere neurologische aandoeningen,
- Voor de algemene verzorger of semi of non ambulante gebruiker.



- Alzheimer
- Huntington
- Opgezwollen armen en benen
- Anti Decubitus

EXCLUSIEVE VERDELER BELGIË

www.mobimed.be | info@mobimed.be



MOBIMED®

Hoofdkantoor & Showroom

Bruggesteeweg 133/3, 8830 Gits (Roeselare)

Tel. +32 478 96 38 21 | Fax +32 51 24 05 21

Showroom enkel open op afspraak!

VRAAG ONZE UITGEBREIDE CATALOGUS